

HỆ THỐNG LÀM ẤM ĐỔI LƯU KHÍ

WARMAIR® VÀ FILTEREDFLO®

Hệ thống làm ấm bệnh nhân WarmAir® là một thiết bị nhỏ gọn và yên tĩnh, mang lại không khí ấm áp di chuyển nhẹ nhàng bằng máy thổi tốc độ thấp. Tất cả không khí được lọc qua máy WarmAir® và chắn FilteredFlo®. Với các hệ thống theo dõi an toàn bên trong máy, người sử dụng sẽ được cảnh báo nếu nhiệt độ tăng/giảm so với cài đặt nhiệt độ, bảo vệ nhiều hơn cho bệnh nhân của bạn.

- Giúp bệnh nhân thoải mái trước và sau phẫu thuật
- Duy trì nhiệt độ bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật
- Giữ ấm bệnh nhân sau phẫu thuật



WarmAir®

HỆ THỐNG LÀM ẤM ĐỐI LƯU KHÍ

Làm ấm đối lưu khí mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân:

- Ngăn ngừa nguy cơ hạ thân nhiệt trong quá trình phẫu thuật
- Giữ nhiệt độ cơ thể bệnh nhân ổn định
- Giảm cảm giác khó chịu trước, trong và sau khi phẫu thuật.



Đặc điểm máy làm ấm WarmAir®:

- Hoạt động yên tĩnh
- Bốn cấp độ trị liệu
- Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ
- Báo động nhiệt độ quá cao và quá thấp



FilteredFlo®


CHĂN LÀM ẤM ĐỐI LƯU KHÍ

Chăn FilteredFlo®:

- Cung cấp giải pháp nhiệt trước, trong và sau khi điều trị
- Phân phối khí ấm trải đều
- Dễ dàng quản lý chăn và không bị “bay”
- Có thể gấp lại để dễ dàng để tiếp cận bệnh nhân của bạn


Gentherm sử dụng kỹ thuật làm ấm khí lọc trái ngược với làm ấm bằng không khí cưỡng bức.

Thiết kế độc đáo được cấp bằng sáng chế của chăn FilteredFlo® cho phép sử dụng máy thổi tốc độ thấp để cung cấp dòng khí sạch, chuyển động nhẹ nhàng. Chăn cũng hoạt động như một bộ lọc thứ hai cho không khí trải đều trước khi nó đến được với bệnh nhân.

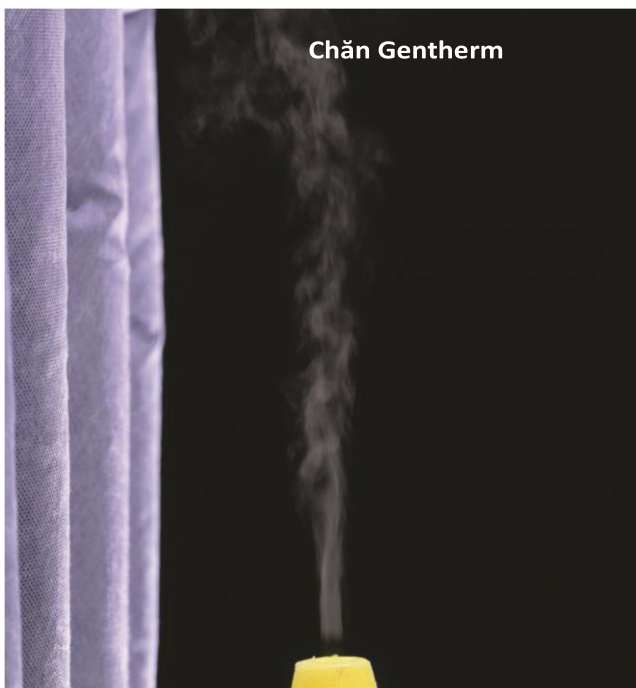

Chăn Gentherm

Chăn Gentherm FilteredFlo® giữ không khí ấm áp gần chăn và gần bệnh nhân.

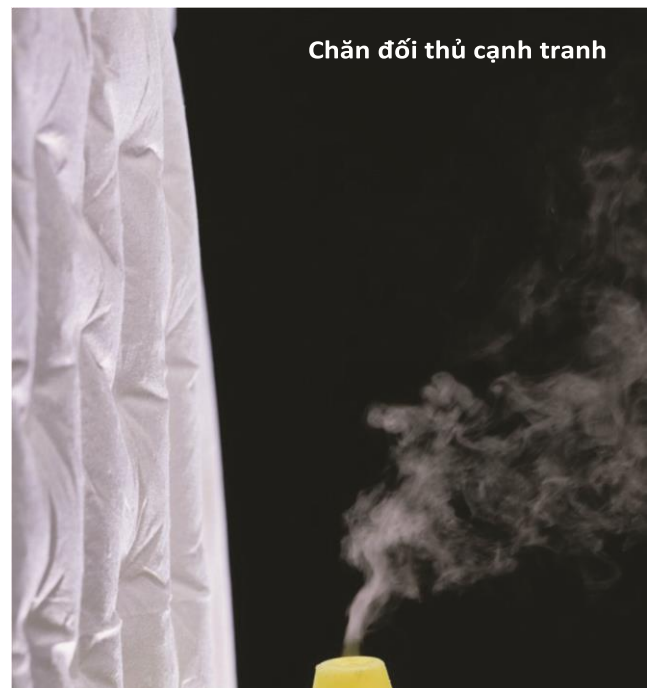

Chăn đối thủ cạnh tranh

Chăn đối thủ cạnh tranh với phương pháp khí cưỡng bức.

WarmAir® & FilteredFlo®

HỆ THỐNG LÀM ẤM ĐỔI LƯU KHÍ

Thông tin đặt hàng

Cat No.	Mô tả	Số lượng
135	WarmAir®	110v/115v, 100v,220v/240v
UNV LPS	Universal Stand	ea.
FilteredFlo® Blankets		
243	Người lớn 92in x 50in (233.7cm x 127cm)	10/carton
443	Phần cơ thể trên 88in x 30in (223.5cm x 76.2cm)	10/carton
442	Phần cơ thể dưới 53in x 40in (134.6cm x 101.6cm)	10/carton
344	Phần thân 43in x 40in (109.2cm x 101.6cm)	10/carton
244	Bệnh nhi 55in x 40in (142.2cm x 101.6cm)	10/carton
246	Sơ sinh 24in x 37in (61cm x 94cm)	10/carton
542	Chăn tiệt trùng cho phẫu thuật tim 72in x 50in (182.8cm x 127cm)	5/carton
145	Ống làm ấm 28in x 66in (71.1cm x 167.6cm)	25/carton
247	Chăn lót dưới cho nhi 72in x 36in (182.8cm x 91.44cm)	10/carton
248	Chăn lót dưới cho người lớn 78.5in x 40in (199.4cm x 101.6cm)	10/carton
460	Phần cơ thể trên 36in x 46in (91.44cm x 116.84cm)	40/box
461	Phần cơ thể trên 24in x 78in (60.96cm x 198.12cm)	40/box
462	Toàn thân người lớn 36in x 80in (91.44cm x 203.20cm)	40/box

Ống làm ấm™



Chăn sơ sinh



WarmAir®

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Kích thước:

8.75" Dài x 8.75" Rộng x 13.5" Cao
(22.2cm x 22.2cm x 34.3cm)

Nặng: 13.5 lbs. (6.1kg)

Bộ lọc:

0.2 microns, hiệu quả cao

Luồng khí tối thiểu:

28 cfm (100v, 115v)
26 cfm (230v)

Nhiệt độ cài đặt:

Không làm (nhiệt độ môi trường)
32.2°C +4°C/-2°C
(90°F +7.2°F/-3.6°F)

37.8°C +4°C/-2°C

(100°F +7.2°F/-3.6°F)

43.3°C +4°C/-2°C

(110°F +7.2°F/-3.6°F)

Môi trường hoạt động:

16°C - 27°C (60°F - 80.6°F)

Nhiệt độ tối đa bề mặt tiếp xúc:

48°C (118.4°F)

Cài đặt nhiệt độ tối đa:

43.3°C + 4.0°C (110°F + 8°F)

Báo động an toàn:

Báo động âm thanh & nhìn thấy khi nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá

Công nghệ của thời đại mới™

www.gentherm.com

CLINICAL 24/7 SUPPORT: 1.513.460.2038 TECHNICAL 24/7
SUPPORT: 1.888.437.5608